

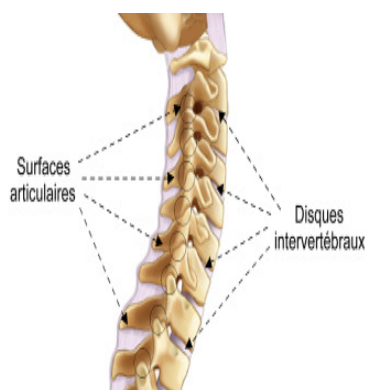
DESCRIPTION :

Collier cervical en mousse semie ferme recouvert d'une enveloppe jersey protectrice

CARACTERISTIQUES:

Collier cervical composé d'une mousse de forme anatomique recouverte de jersey non traumatisant et d'une fermeture de type Velcro permettant un réglage précis.

- Sa forme anatomique apporte un certain confort,
- Livré avec enveloppe jersey lavable supplémentaire à enfiler sur le collier pour une meilleure hygiène,
- Disponible en 6 tailles (Longueur et hauteur)
- Contient du latex naturel
- Ne contient pas de phthalate

**INDICATIONS:**

Syndrôme cervical douloureux, aigu ou chronique (arthrose cervicale, torticolis, entorse cervicale bénigne)

MODE D'EMPLOI:

Application :

Le collier cervical Actimove® Cervical Comfort est préformé et destiné à épouser les contours du cou.

Placer le collier devant le cou et faire reposer le menton dans la découpe prévue à cet effet.

Enrouler le collier autour du cou et fermer à l'aide de l'attache

PARTICULARITES D'UTILISATION:

- En cas de gonflement anormal, d'Hyperhydrose, de décolation anormale de la peau ou de gêne inhabituelle, nous recommandons d'interrompre l'utilisation du collier et de consulter un médecin.
- Veiller à ne pas trop serrer le collier pour ne pas entraver la respiration.
- S'assurer que les soins appropriés des plaies ouvertes ou zones infectées soient entrepris avant application.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mesurer le tour et la hauteur du cou afin de choisir un collier cervical adapté et éviter toute tension excessive.

ENTRETIEN :

Le collier cervical Actimove* Cervical Comfort peut être lavé à l'eau tiède ou en machine à 30°C (cycle délicat). Fermer les attaches avant de laver le collier en machine. Rincer abondamment et laisser sécher à température ambiante.

S'assurer que le collier soit parfaitement sec avant la prochaine utilisation.

Chlorage & repassage interdit,

Nettoyage à sec interdit,

Séchage en tambour interdit

CONTRE-INDICATIONS:

Atteintes sévères des cervicales de type fractures

CONDITIONNEMENT:

Présentation unitaire avec notice d'utilisation

Boîte carton unitaire avec notice d'emploi

1. Présentation pharmacie avec vignette LPPR

1. Extra petit : Haut. 6,5 cm - Long. 26-33 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165562	4287317	72859-09036-00	XS	1	30	2118823

2. Petit : Haut. 7,5 cm - Long. 30-36 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165579	4287323	72859-09037-00	S	1	30	2118823

3. Moyen : Haut. 9 cm - Long. 33-39 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165586	4287346	72859-09038-00	M	1	30	2118823

4. Grand : Haut. 10 cm - Long. 36-42 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165593	4287352	72859-09039-00	L	1	30	2118823

5. Très grand : Haut. 11 cm - Long. 39-45 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165609	4287369	72859-09040-00	XL	1	30	2118823

6. Très grand-court : Haut. 7 cm - Long. 38-48 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165616	4287375	72859-09041-00	XXL court	1	30	2118823

2. Présentation hôpital sans vignette LPPR

1. Extra petit : Haut. 6,5 cm - Long. 26-33 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165562		72859-00036-00	XS	1	30	

2. Petit : Haut. 7,5 cm - Long. 30-36 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165579		72859-00037-00	S	1	30	

3. Moyen : Haut. 9 cm - Long. 33-39 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165586		72859-00038-00	M	1	30	

4. Grand : Haut. 10 cm - Long. 36-42 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165593		72859-00039-00	L	1	30	

5. Très grand : Haut. 11 cm - Long. 39-45 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165609		72859-00040-00	XL	1	30	

6. Très grand-court : Haut. 7 cm - Long. 38-48 cm

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809165616		72859-00041-00	XXL court	1	30	

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Produit livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :
N° Vert : 0 800 302 282



- Système de Management certifié
- EN ISO 9001
- EN ISO 13485